



### **RUN-2011/J-PC**

larghezza: 70 cm  
lunghezza: 188 cm  
altezza: 142 cm  
massa: 145 kg

#### **Specifiche tecniche:**

- Monitor 10.1" touch screen resistivo;
- PC iMX6 DL 1GB, Micro SD 8GB, sistema operativo Linux;
- Porta USB;
- Wifi;
- Porta RS232 (protocollo Trackmaster);
- Velocità Max 20 km/h;
- Velocità Min 0.1 km/h;
- Variazione minima 0.1 km/h;
- Inclinazione Max 22%;
- Inclinazione Min 0%;
- Variazione Inclinazione 0.5 / 1%;
- Variazione elettronica velocità e inclinazione;
- Rilevamento cardio: fascia toracica + palmare;
- Sistema di auto-centraggio del nastro;
- Sistema di auto-lubrificazione del nastro;
- Superficie di camminamento: 140 x 48 cm;
- Trasformatore toroidale 123 VA;
- Inverter 1.5 kw;
- Alimentazione 220~240Vac 50/60 Hz 10Amp;
- Circuito Ausiliario Inclinazione: 18 Vac;
- Circuito Ausiliario Console: 12 Vcc;
- Potenza Motore (picco max) 5 HP (AC);
- Potenza Assorbita Max dal motore 2000 VA;
- Potenza Assorbita Nominale 1500 VA;


- Potenza Sonora < 30 DB;
- Tavola Ammortizzata;
- Peso Massimo dell'Utente 150 kg;
- stop emergenza a pulsante ed a strappo;
- certificato di conformità CE;

#### **Accessori di serie:**


- Ruote per lo spostamento;
- Fascia toracica per cardio-frequenzimetro;
- Dotazione di servizio;
- Porta borraccia;

#### **Funzioni della console (figura 1):**

- Manuale (figura 2);
- Cardio (figura 3);
- Consumo Grassi (figura 3);
- Tempo (figura 4);
- Distanza (figura 5);
- Calorie (figura 6);
- 10 Profili (pre-impostati) (figura 7/8);
- 100 Profili Liberi (figura 7/8);
- Test: CHR test, CWL test, COOPER test, VAMEVAL test, RUNNER test, BRUCE test, BRUCE MODIFIED test, ASTRAND MODIFIED test, ELLESTAD test, ACIP test, TEST01-08; (figura 9);
- Salvataggio esercizio su chiavetta USB (figura 10);

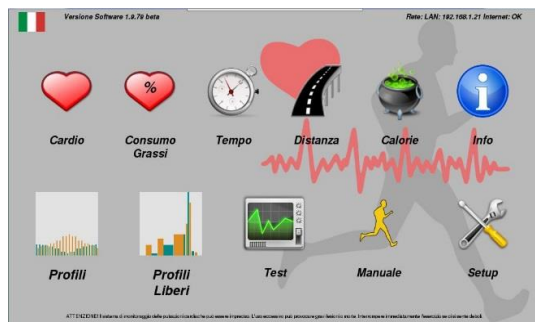

(figura 1)

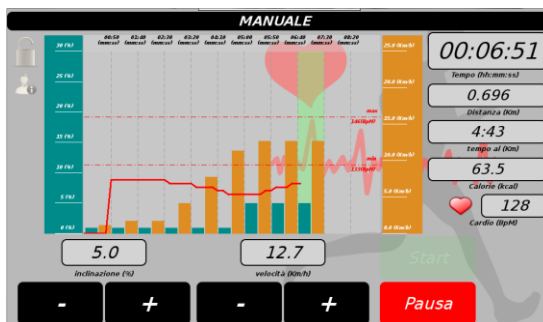

(figura 2)

**DATI PERSONALI**

Sesso - **M** +  
 Età - **50** +  
 Peso (Kg) - **70** +  
 Frequenza Cardiaca Max Teorica (BpM) - **173** +  
 FC Min (BpM) - **129** + FC Max (BpM) - **147** +

**TEMPO** **DISTANZA** **CALORIE**

Imposta i dati personali e scegli la modalità di esecuzione dell'esercizio

(figura 3)

**IMPOSTA LA DURATA DELL' ESERCIZIO**

Riscaldamento (mm:ss) - **01:00** + (Km/h) - **1.86** +  
 Defaticamento (mm:ss) - **01:00** + (Km/h) - **1.86** +  
 Tempo esercizio (hh:mm:ss) - **00:05:00** +

**CONFERMA**

(figura 4)

**IMPOSTA LA DURATA DELL' ESERCIZIO**

Riscaldamento (mm:ss) - **01:00** + (Km/h) - **1.86** +  
 Defaticamento (mm:ss) - **01:00** + (Km/h) - **1.86** +  
 Distanza(Km.mt): - **1.000** +

**CONFERMA**

(figura 5)

**IMPOSTARE I PARAMETRI DELL'ESERCIZIO**


Riscaldamento (mm:ss) - **0:00** + (Km/h) - **3.0** +  
 Defaticamento (mm:ss) - **0:00** + (Km/h) - **3.0** +  
 Calorie esercizio (KCal) - **100** +

**CONFERMA**

(figura 6)



(figura 7)

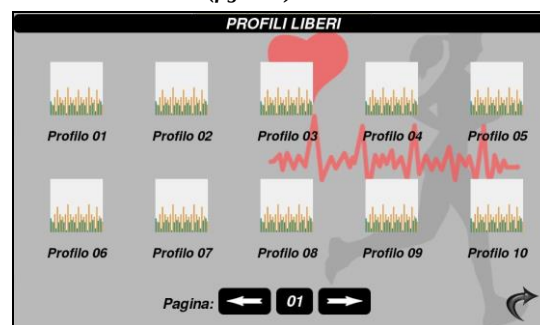


(figura 8)

**TEST**

CHR CWL COOPER  
 VAMEVAL RUNNER BRUCE  
 BRUCE MODIFIED ASTRAND MODIFIED ELLESTAD  
 ACIP TEST 01 TEST 02  
 TEST 03 TEST 04 TEST 05  
 TEST 06 TEST 07 TEST 08

Selezionare il tipo di test che si vuole eseguire

(figura 9)

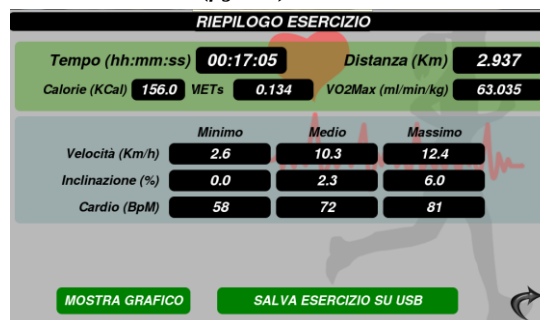

(figura 10)